



Tutorial Kavo Scan eXam


Como utilizar o scanner de Placa de Fósforo.

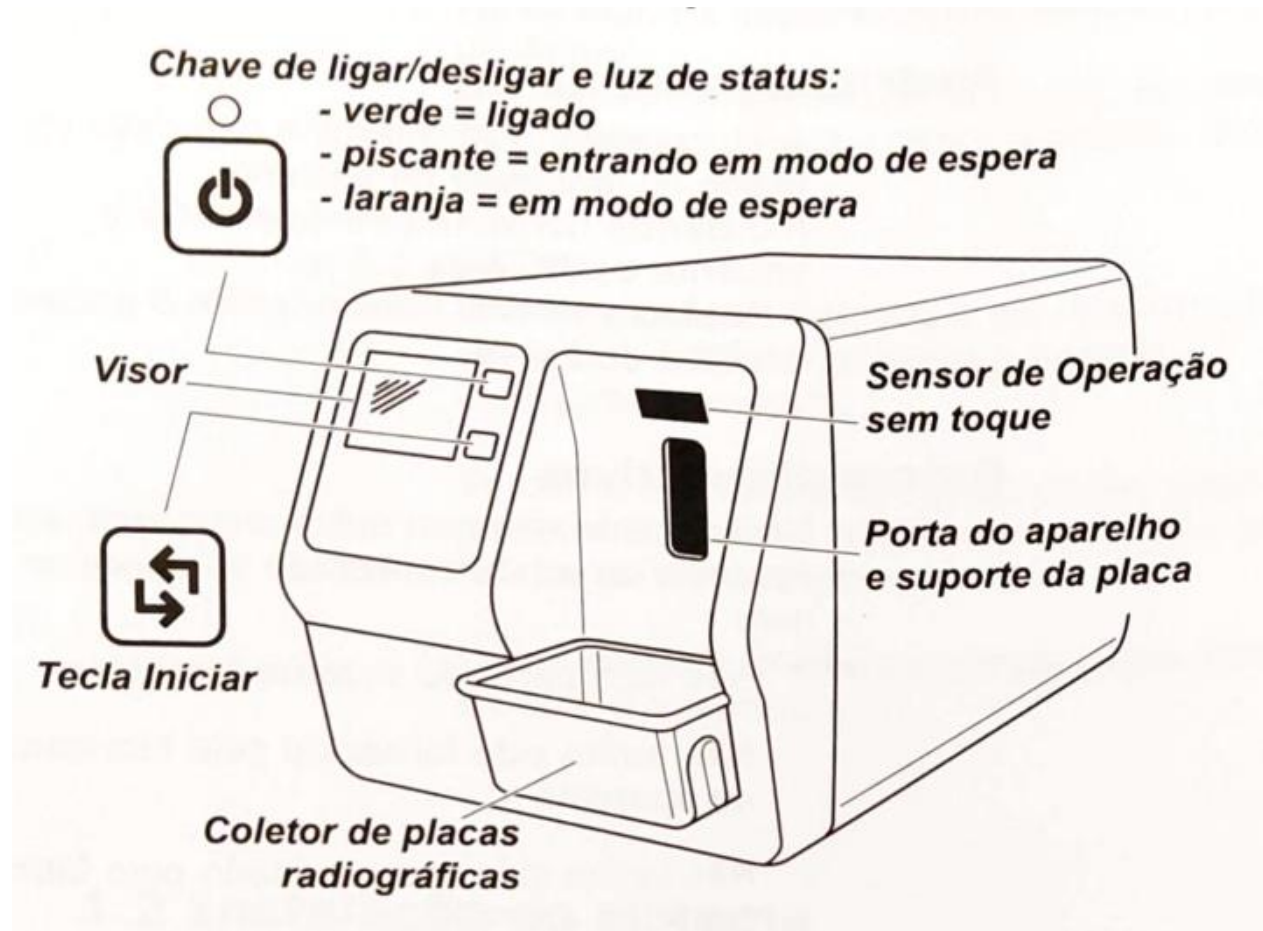

Preparando a placa radiográfica

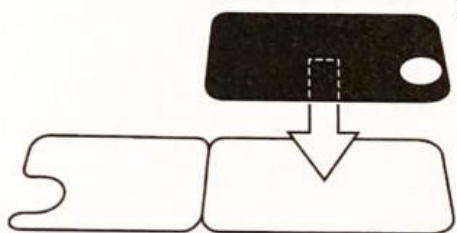

1. Coloque a placa radiográfica que você deseja usar em uma capa protetora. O lado **azul claro** (sensível) da placa radiográfica deve estar voltado para e colocado na metade da capa protetora que tenha o mesmo formato da placa radiográfica.

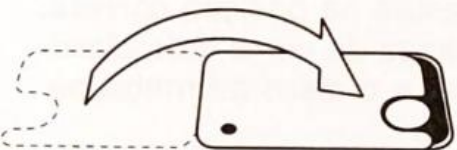

2. Dobre a metade da capa protetora com o corte semicircular para dentro da placa radiográfica. O disco de metal na traseira (lado preto) da placa radiográfica deve aparecer no corte semicircular.



3. Gire a capa protetora e a placa radiográfica para que o lado preto da capa protetora fique mais alta. Isso facilita o deslizamento da capa protetora e da placa radiográfica na bolsa higiênica.



4. Deslize a capa protetora e a placa radiográfica na bolsa higiênica o máximo que puder. Verifique se o lado preto da capa protetora está no mesmo lado que o lado preto da bolsa higiênica.


Abra o Aplicativo Cliniview

O atalho do aplicativo Cliniview se encontra na área de trabalho dos computadores.




No campo ID Romeu, digite o código de identificação do paciente.

Caso a tela de Pesquisa não esteja aparecendo, clique no botão Paciente (rosto de perfil)

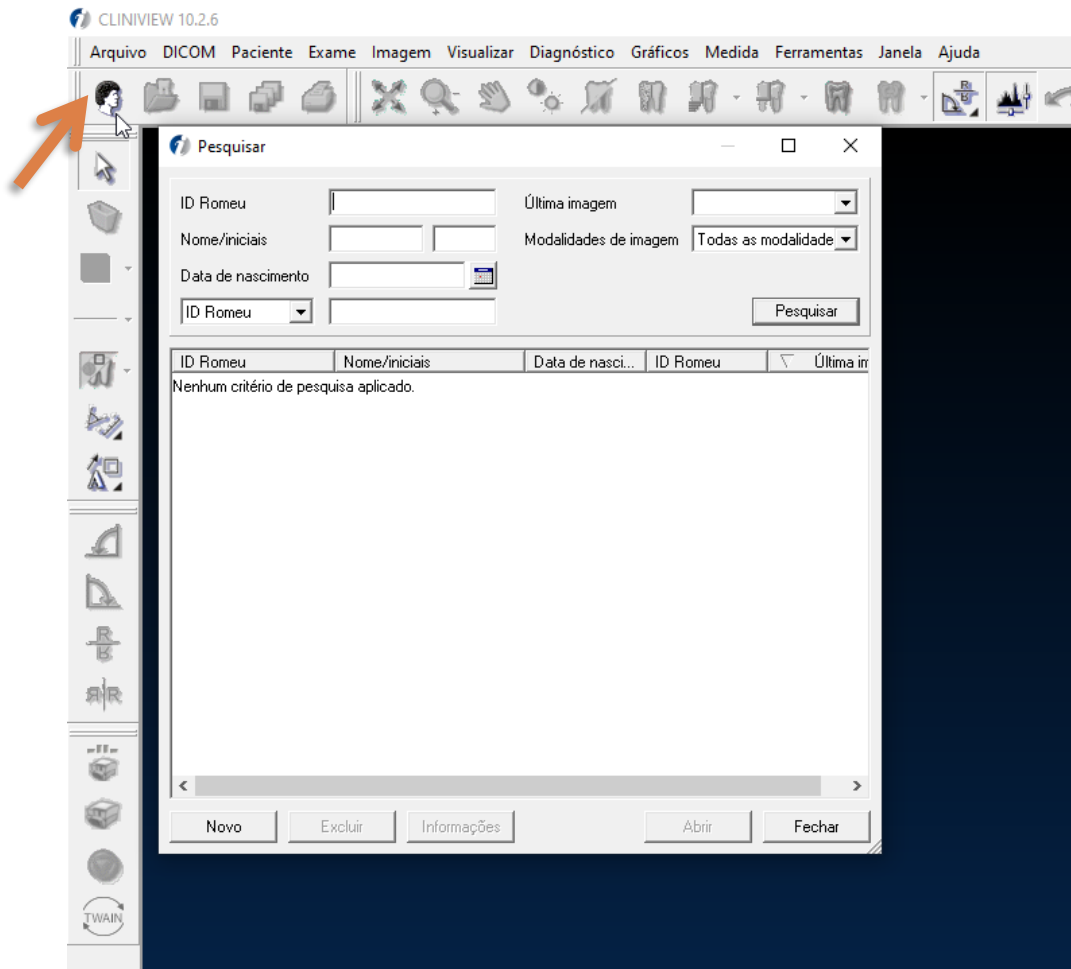


Pesquisando o Paciente

Após inserir o código do paciente, clique no botão PESQUISAR e em seguida selecione o Paciente e clique em Abrir.

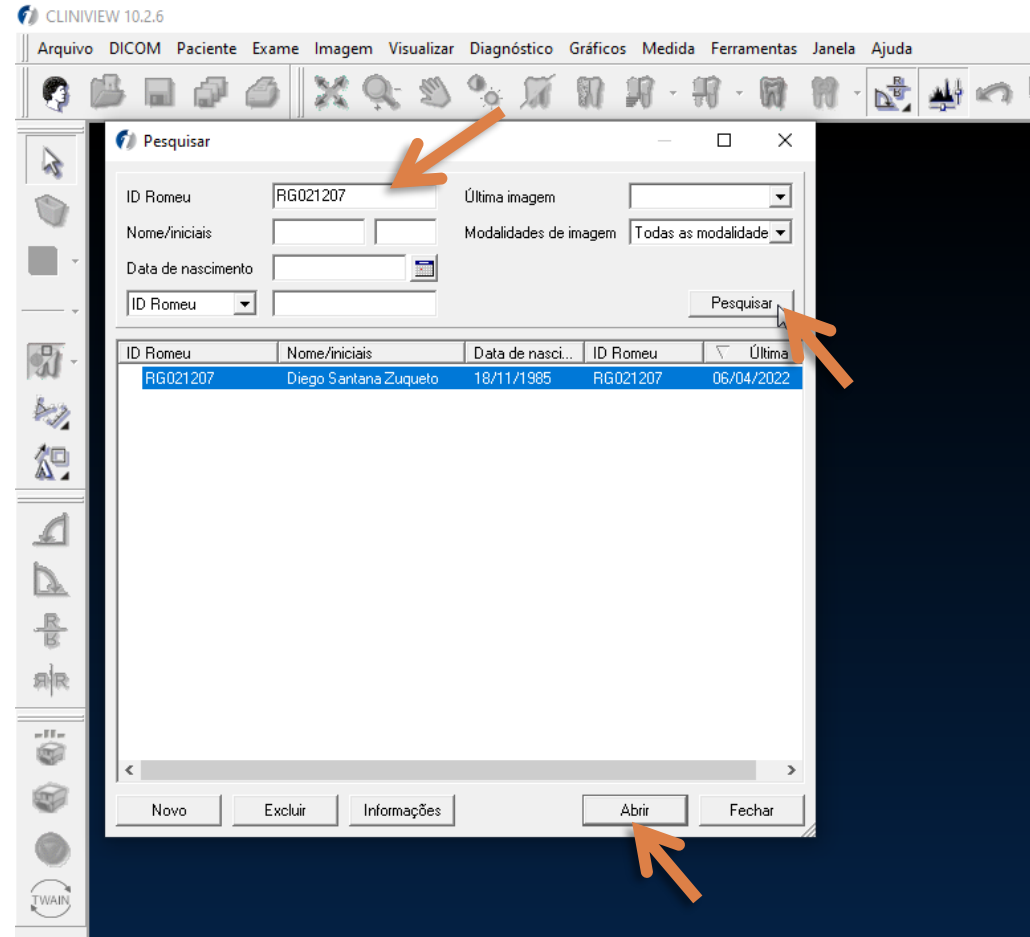

Paciente não encontrado

Caso o sistema indique que Nenhum paciente foi encontrado, clique no botão NOVO

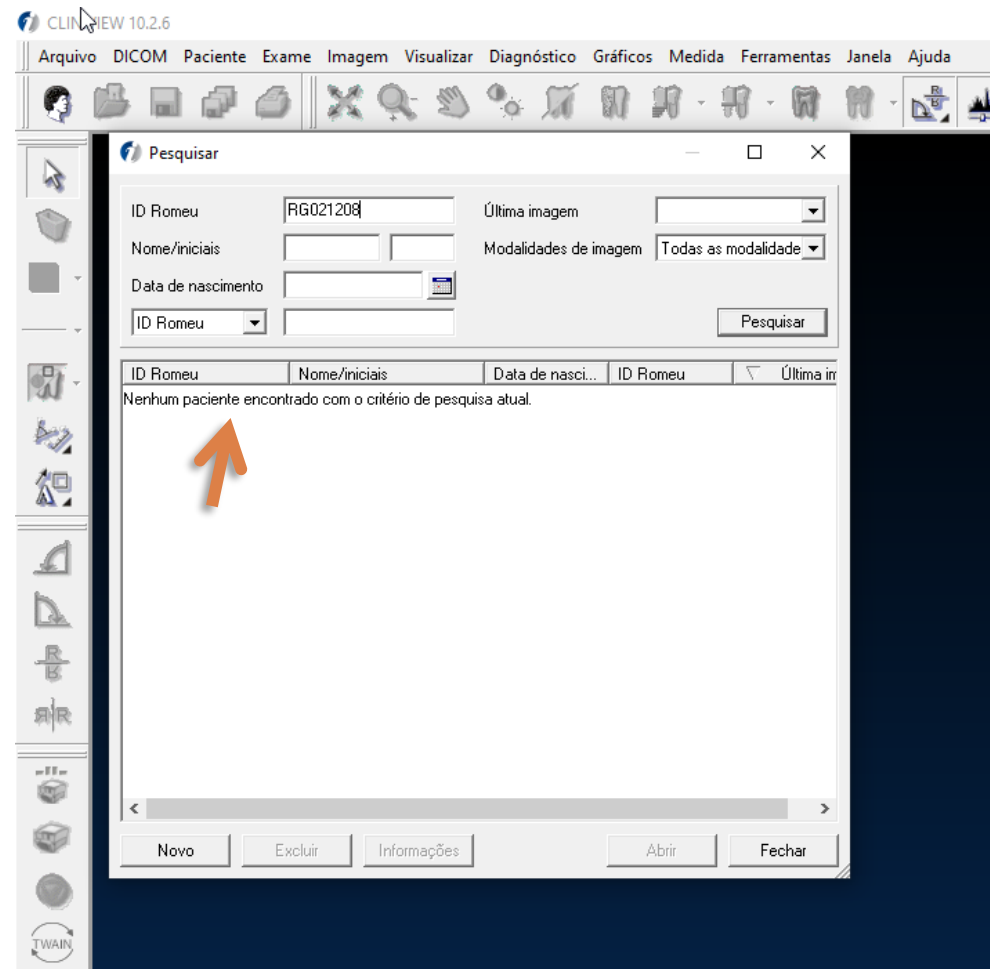

Cadastrando um novo Paciente

Ao clicar em NOVO a tela Informações do Paciente será carregada. Preencha:

- Campo **ID Romeu** (2x) com o código do Paciente
- Campo **NOME** coloque o **NOME COMPLETO** do paciente

em seguida clique em SALVAR

CLINIVIEW 10.2.6


Arquivo DICOM Paciente Exame Imagem Visualizar Diagnóstico Gráficos Medida Ferramentas Janela Ajuda

Informações do paciente

Prefixo	ID Romeu	Nome	Segundo nome	Sufixo
	RG013184	Alcimar Jorge Ambrósio		
Data de nascim		ID Romeu	RG013184	
Sexo		Seguro social		
Última imagem		ID do paciente (Brid		
Provedor 1		Provedor 2		
Endereço 1		Telefone residen		
Endereço 2		Telefone comerc		
Cidade		Fax		
CEP		E-mail 1		
Estado		E-mail 2		
Tipo de mapa de dentes <input checked="" type="radio"/> Permanente <input type="radio"/> Decíduo				
Notas				
<div></div>				
Salvar Cancelar				


Carregando o Paciente

Após o cadastro carregue o paciente selecionando o mesmo e clicando no botão ABRIR

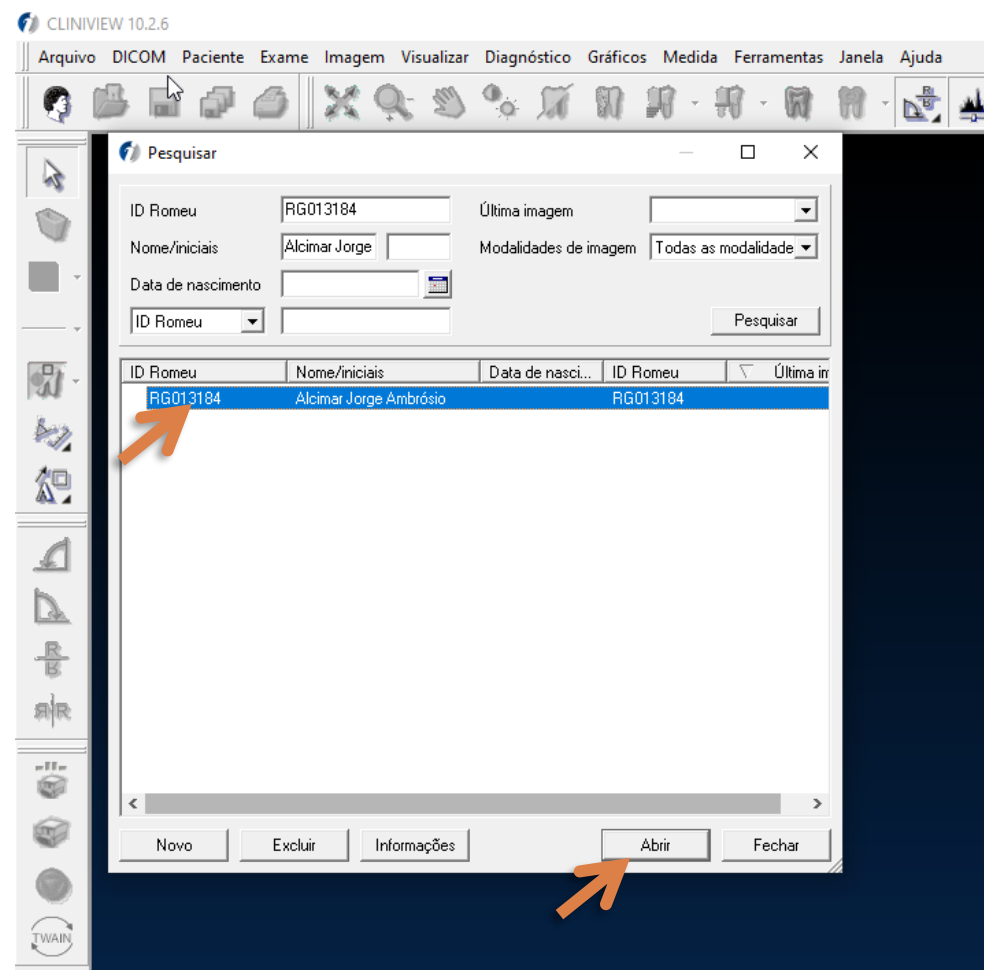

Digitalizando a Radiografia

Verifique na barra de título do Cliniview se o Paciente carregado está correto. Em seguida clique no 2º Botão amarelo para inicializar a digitalização

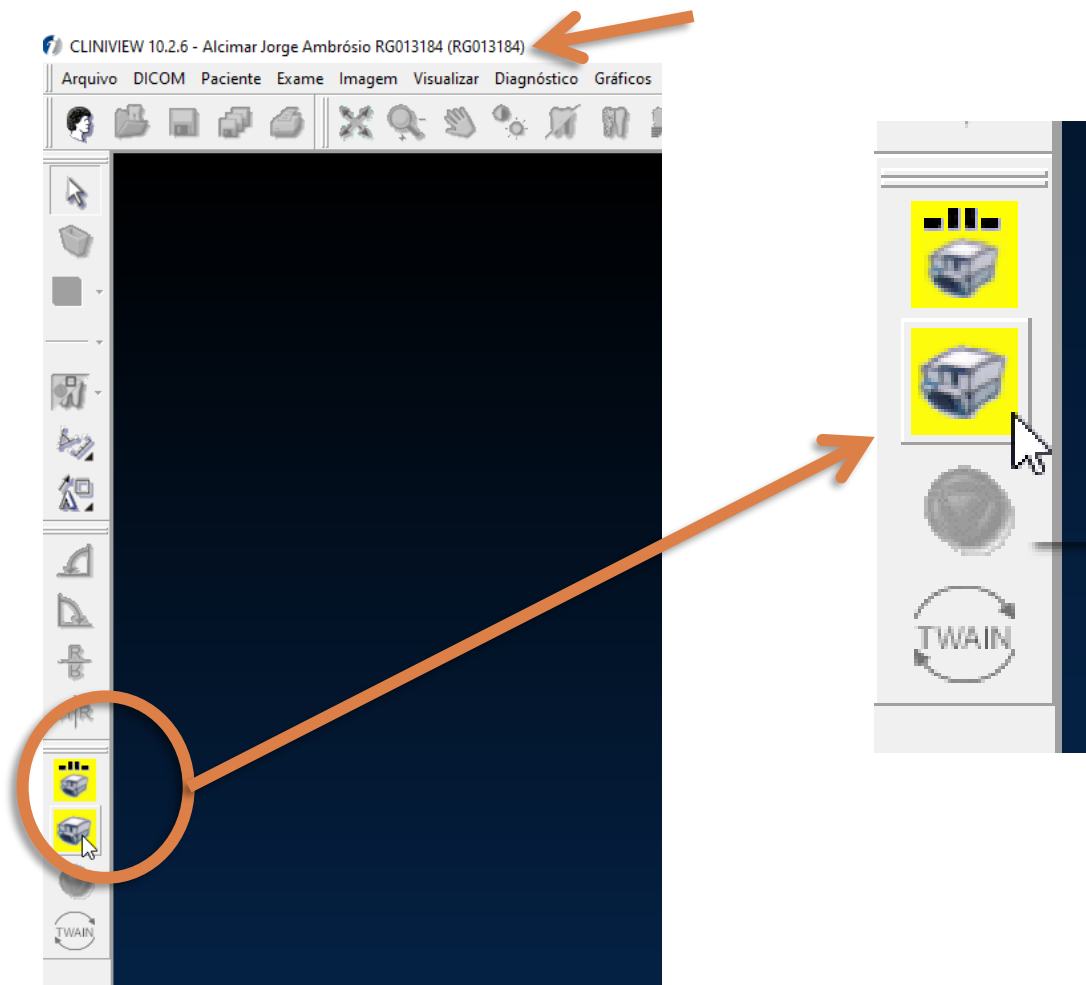


Escaneando o Filme

1 - Remova o protetor higiênico. Coloque a placa de fósforo no slot com a parte de metal para o lado direito, encostado com o fundo na parte inferior do Slot

2 - Após detectar o filme, retire a capa protetora de papel

3 – O programa irá mostrar a tela indicativa de progresso de escaneamento

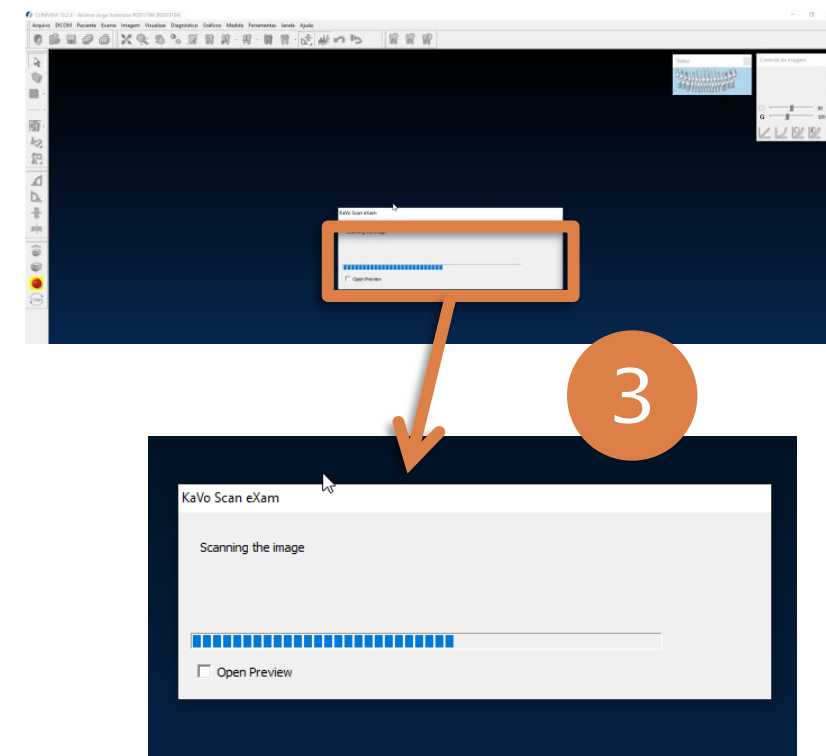


Revelando a radiografia

1 - Ao final do processo de digitalização, sua radiografia irá aparecer na tela. Caso a mesma esteja em branco clique em Fechar (X).

2 - Em seguida na caixa de diálogo clique em **NÃO**. Refaça a exposição do filme.

Após o escaneamento o filme é apagado automaticamente para um novo uso.

Não descarte o mesmo

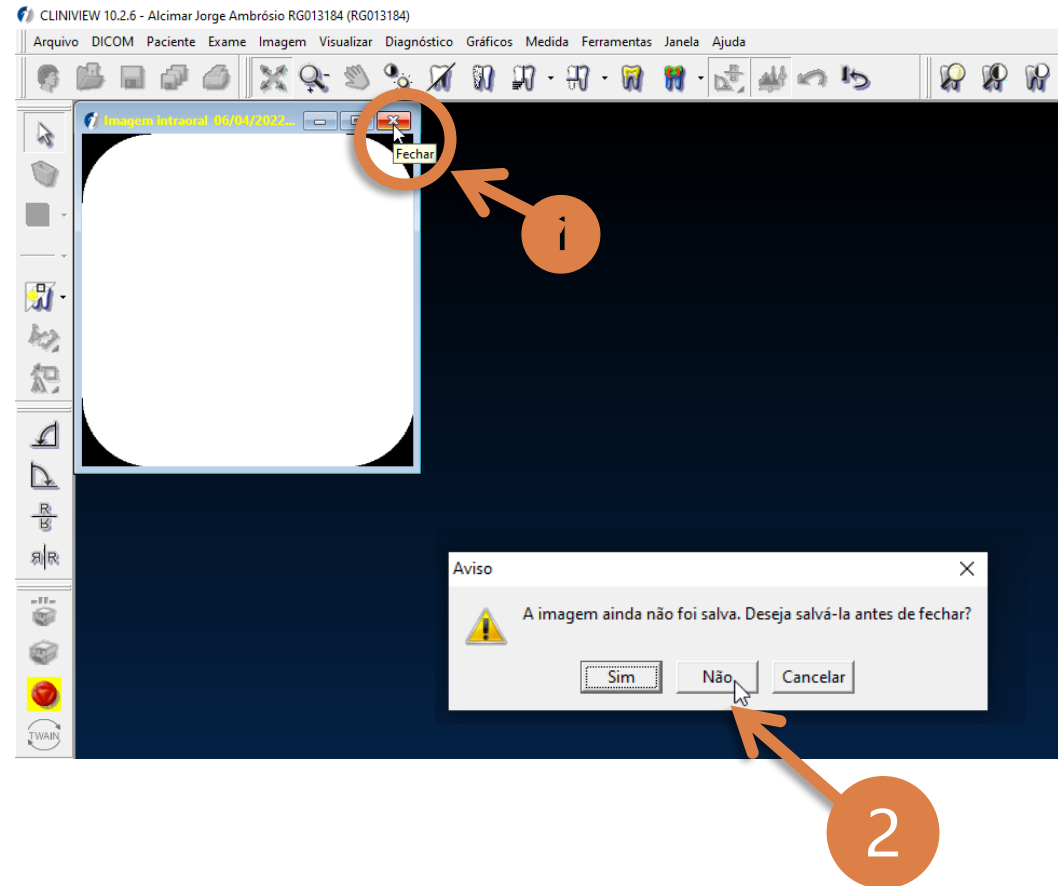



Revelando a radiografia

1 - Ao final do processo de digitalização, sua radiografia irá aparecer na tela.

Após o escaneamento o filme é apagado automaticamente para um novo uso.

Não descarte o mesmo


2 – Se necessário rotacione a imagem para a posição correta utilizando os botões de rotação

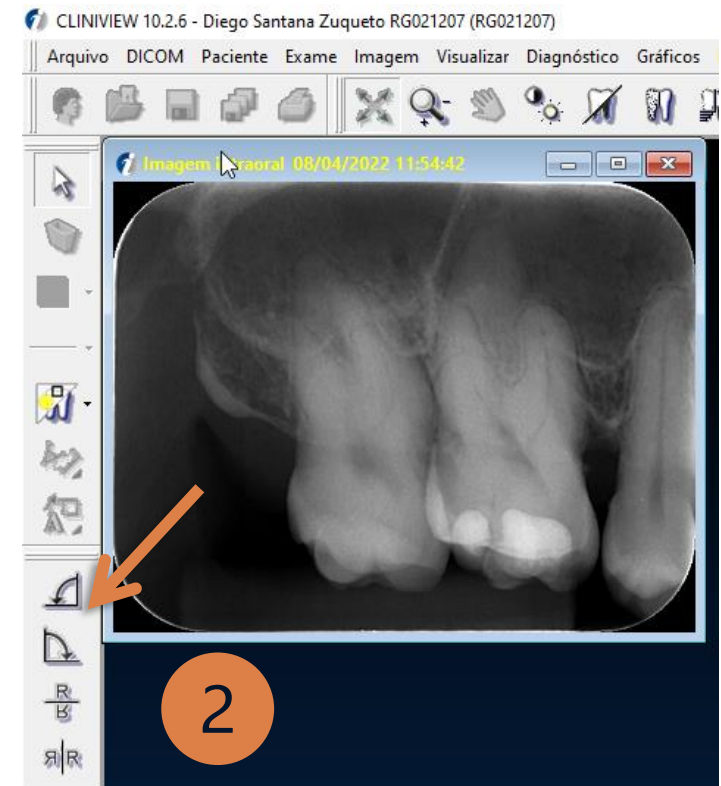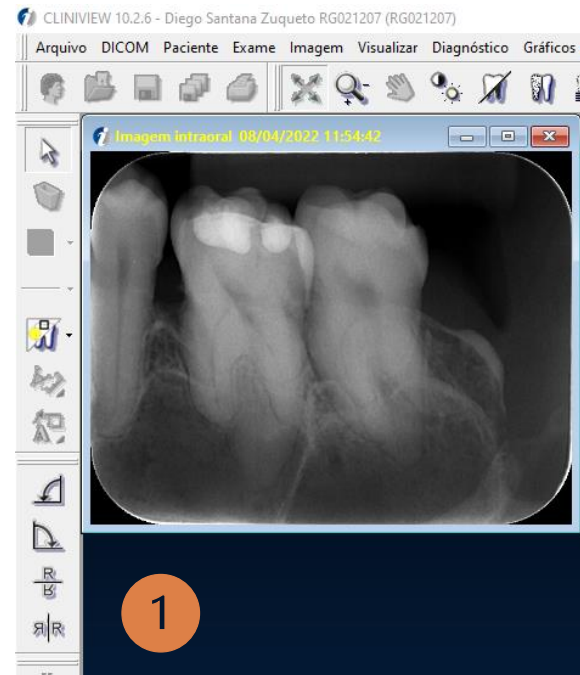

Salvando a radiografia

1 – Clique no X para fechar a imagem e salvar.


2 – Na caixa de diálogo clique em **SIM**

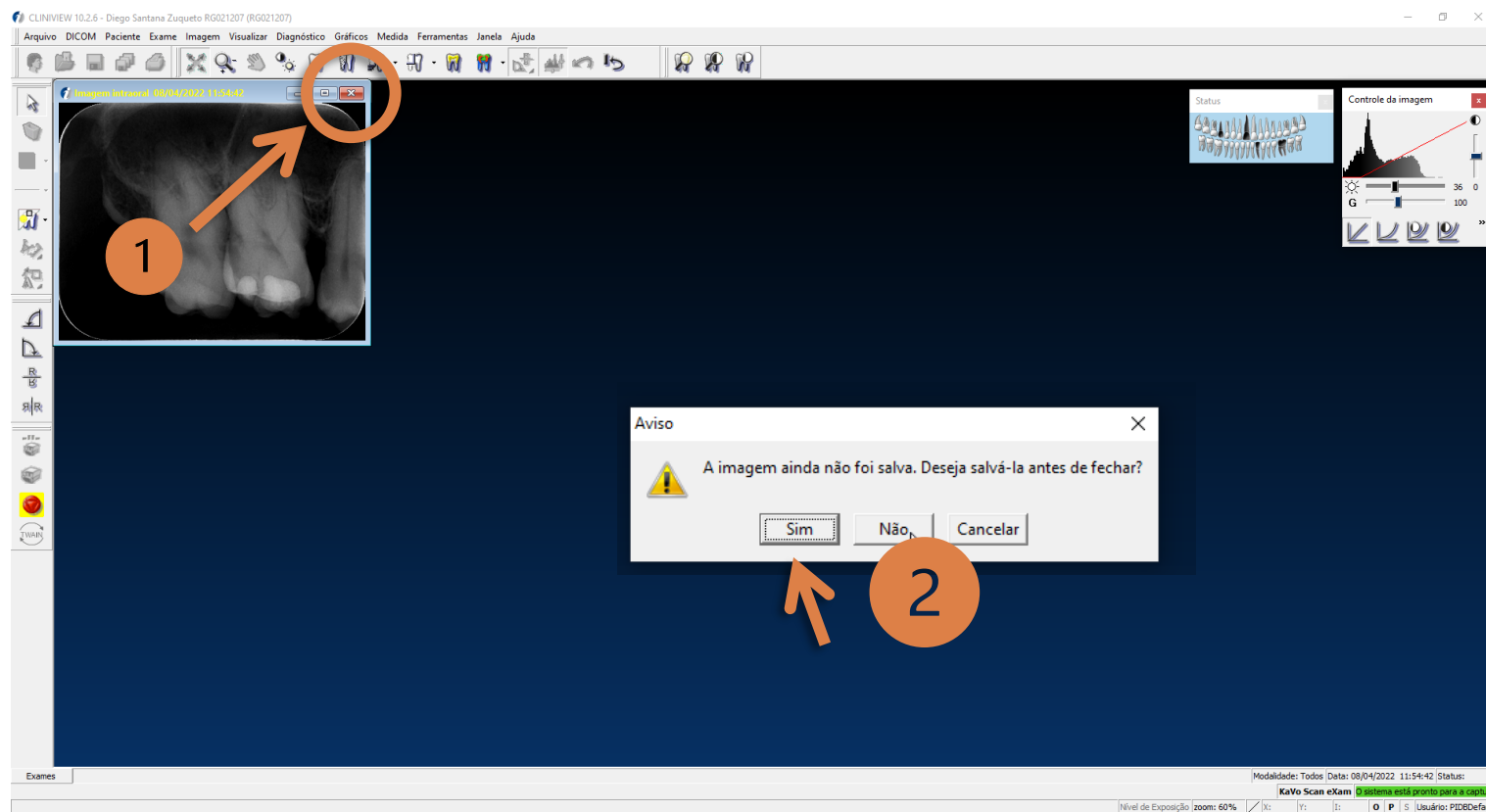

Selecionando o dente

Selecione os dentes correspondentes a radiografia e em seguida clique em **Salvar**.


Após clicar em Salvar a mesma será exportada automaticamente.

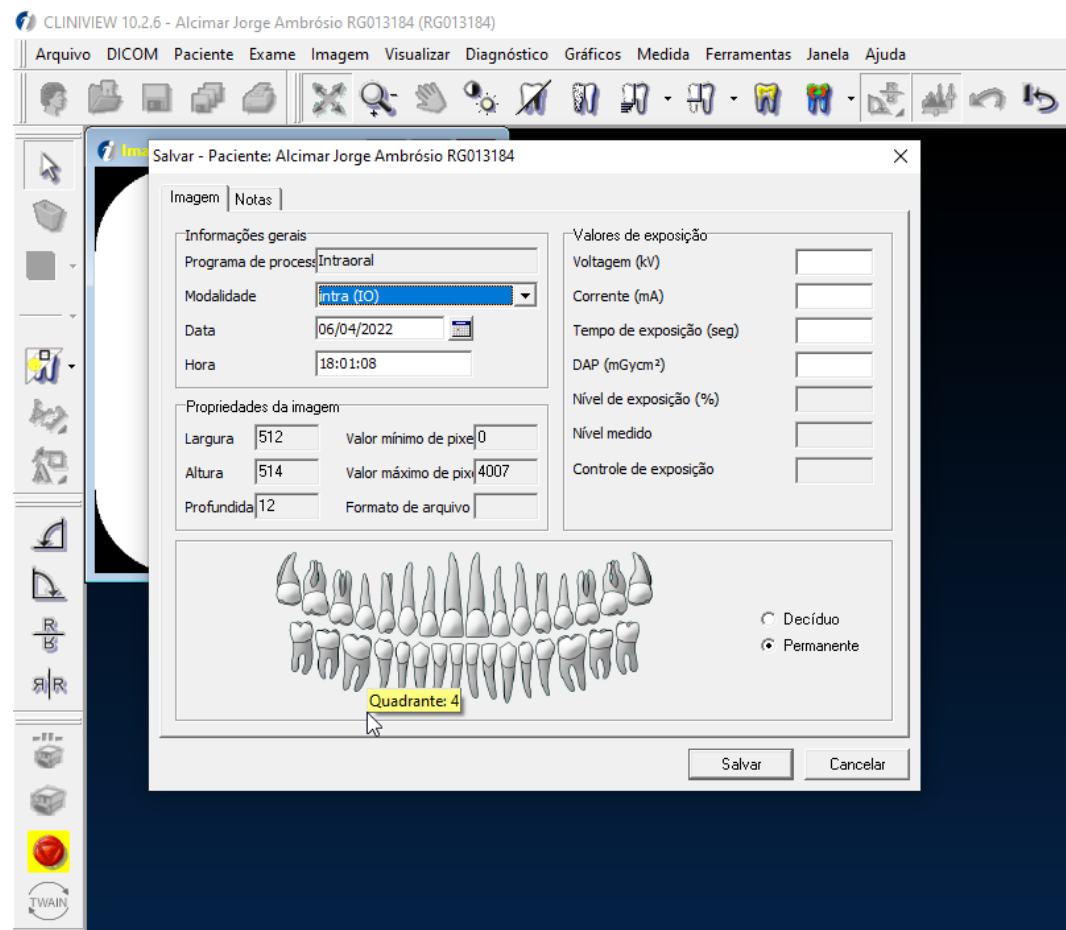

Finalizando a Captura

Após digitalizar e salvar sua radiografia, clique no Botão **CANCELAR CAPTURA** para encerrar o uso.


Libere a máquina para uso de outra pessoa.

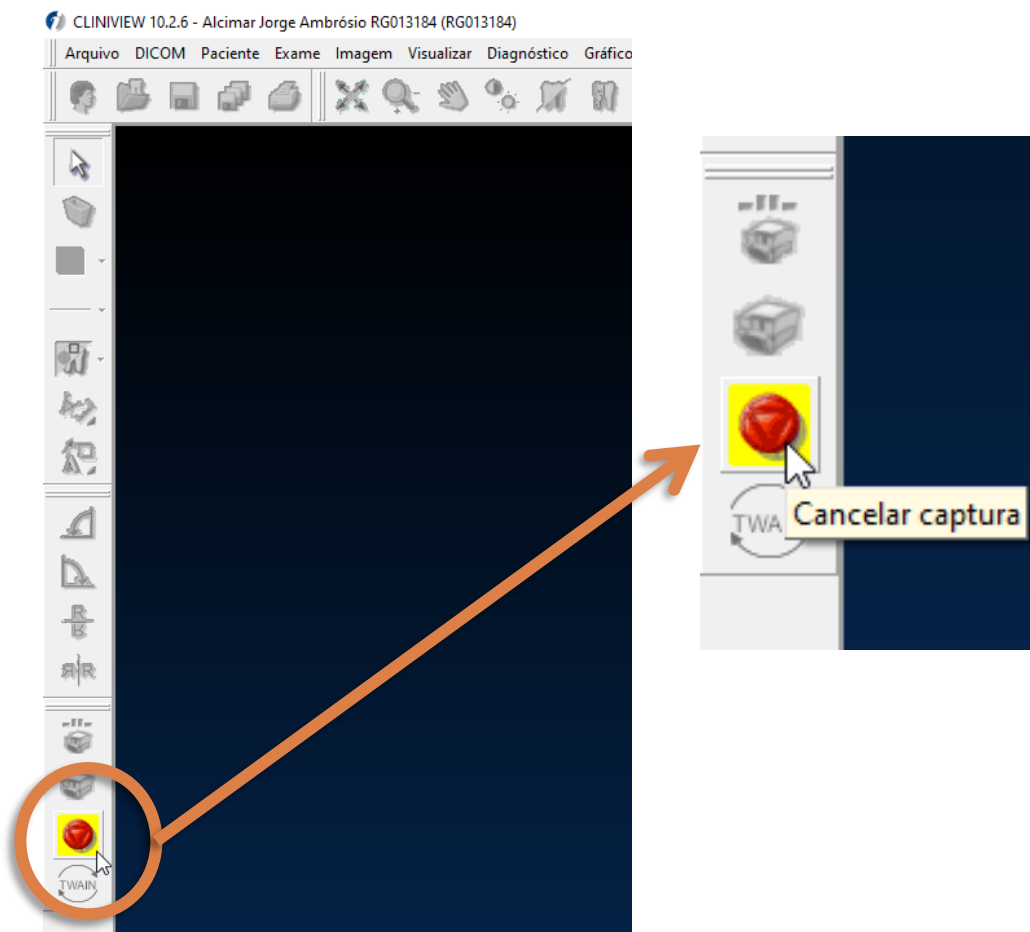

Encontrando a Radiografia

Em qualquer micro da Clínica. Abra a Pasta Escaneamento. (Ícone na Área de Trabalho).

Em seguida acesse a pasta da clínica Correspondente.

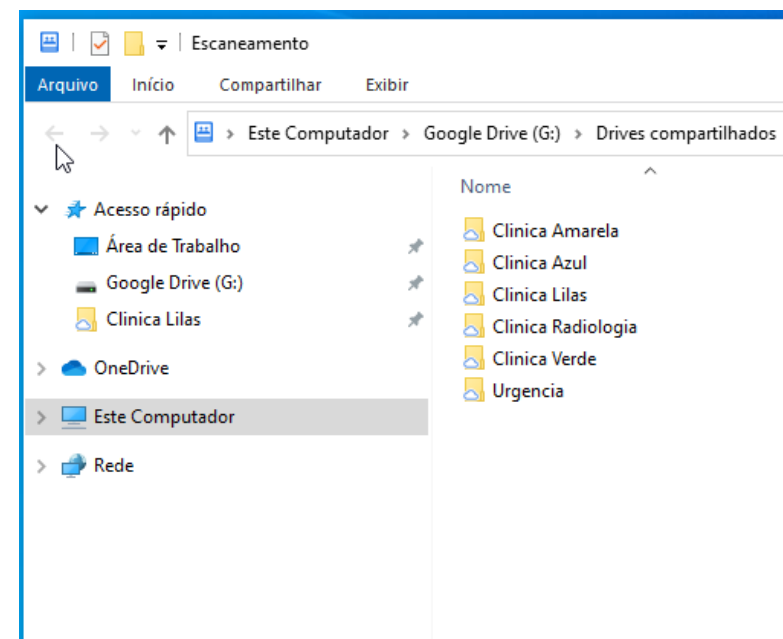


Encontrando a Radiografia

A radiografia exportada encontra-se na pasta da clínica correspondente e o nome do arquivo estará como:

IDROMEU_NOME-COMPLETO_DATA_HORA.png

Dê um duplo clique para abrir a mesma.

Caso a radiografia não apareça espere o termino da sincronização do Google Drive entre as máquinas

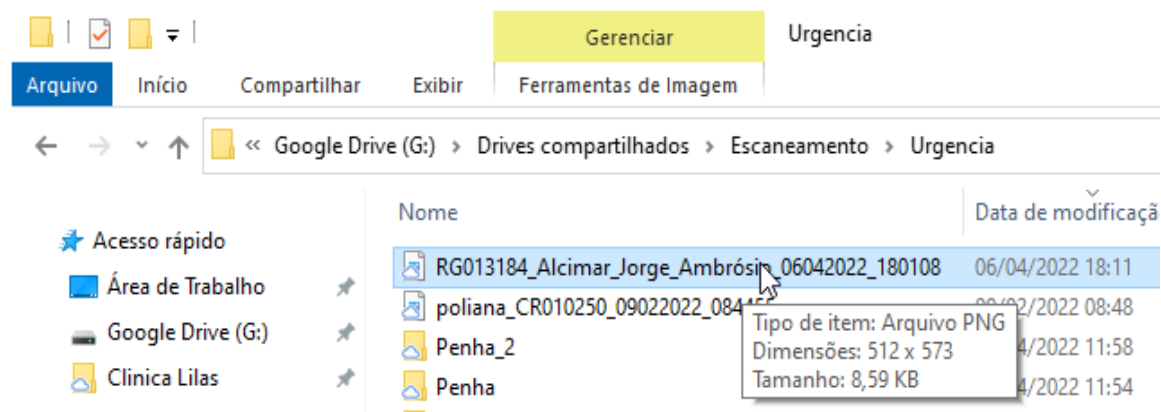

Visualizando a Radiografia


Ao abrir a radiografia, a mesma irá conter além da radiografia, os dados do paciente, data e hora de digitalização e os números dos dentes.

**Não se esqueçam de
submeter as mesmas no
Sistema Romeu**




Sanitização Automática

Antes de utilizar o Scanner de Radiografia, verifique se o mesmo **NÃO** está mostrando a imagem ao lado. Quando essa mensagem estiver sendo exibida o mesmo está em modo de sanitização automática e poderá ser usado após a finalização do contador de tempo.

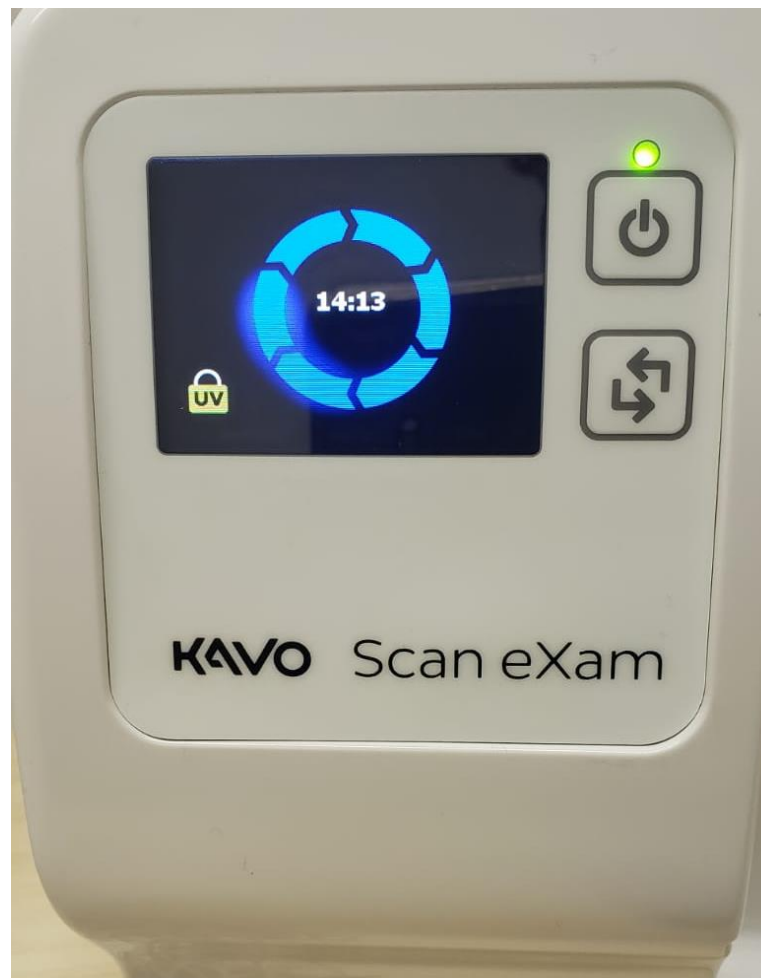

Extra: Apagamento inicial das placas radiográficas

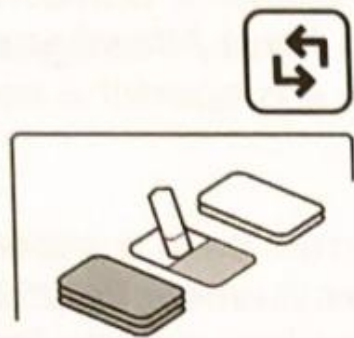

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **Iniciar** por diversos segundos até que a animação do modo de apagamento apareça no visor do aparelho. O aparelho agora está no modo de apagamento.



2. Segure a placa radiográfica pelas bordas (ou use uma capa protetora) e posicione-a para que o lado com o disco de metal (a parte traseira) esteja à direita. Insira a placa radiográfica na porta do aparelho (remova a capa protetora se estiver usada). Um ímã segurará a placa radiográfica na posição e, em seguida, a deslizará para dentro do aparelho.



3. Depois que a placa radiográfica tiver sido apagada, ela será ejetada do aparelho. A placa radiográfica agora pode ser usada para realizar uma exposição.
4. Para sair do modo de apagamento, aguarde 15 segundos para que o aparelho automaticamente saia deste modo ou pressione e mantenha pressionada a tecla **Iniciar** até que a animação de apagamento desapareça.

Créditos

- 
- Faculdade de Odontologia – Universidade de São Paulo
 - Elaboração e Fotografia: Diego Santana Zuqueto
 - Revisado por:
 - ▣ Alcimar Jorge Ambrósio
 - ▣ Edmond Haddad Junior
 - ▣ Fábio Kacuta
 - ▣ José Eduardo Magalhães Marinho